



PEMERIKSAAN CRP ALAT NYCOCARD

**RSUD Dr. M.
ZEIN PAINAN**

No. Dokumen :
079/SPO/LAB/RSSAK/III/2015

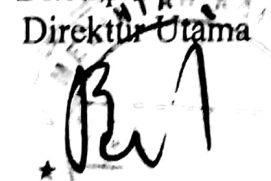
No. Revisi :
01

Halaman :
1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :

Ditetapkan oleh:
Direktur Utama


Drg. H. BUSRIL.MPH
NIP. 19740227 200212 1 004

PENGERTIAN

Pemeriksaan CRP alat adalah pemeriksaan CRP menggunakan alat NycoCard

TUJUAN

Petanda radang / inflamasi

KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur nomor 002/PER/DIR/RSSAK/II/2015 tentang kebijakan pelayanan Rumah Sakit
2. Peraturan Direktur nomor 031/PER/DIR/RSSAK/II/2015 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium

PROSEDUR

1. Masukkan 5 µl sample atau C (Control) kedalam R1/ Dilution Liquid. R1 harus sesuai suhu kamar.
2. Tambahkan 50 µl sample atau control yang telah dilarutkan ke dalam test device. Biarkan meresap sempurna ± 30 detik.
3. Tambahkan 1 twtws R2/ Conjugate ke dalam test device. Biarkan meresap sempurna ± 30 detik. Jarak waktu antara **step 2 dan 3 tidak boleh lebih dari 2 menit.**
4. Tambahkan 1 tetes R3/ washing solution ke dalam test device. Biarkan meresap sempurna ± 20 detik. Jarak waktu antara **step 3 dan 4 tidak boleh lebih dari 2 menit.**
5. Baca hasil dengan Nycocard™ READER II **dalam waktu kurang dari 5 menit.**

UNIT TERKAIT

Unit Laboratorium