



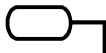
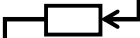
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Nomor SOP	: 524.1/61/Disnak-Keswan/SOP/2015
Tanggal Pembuatan	: Senin, 08 Juni 2015
Tanggal Revisi	: Senin, 24 Agustus 2015
Tanggal Efektif	: Senin, 24 Agustus 2015
Disahkan oleh	: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan
 Ir. NUZIRWAN N MT NIP. 19670826 199803 1 001	
NAMA SOP	PENGAMBILAN SAMPEL DENGAN SWAB PADA OROFARINGEAL UNGGAS
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 PP No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	1 Memahami teknis penanganan unggas
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 SOP Biosekuriti 2 SOP Pemusnahan sampah medis	1 Bangkai unggas atau unggas terinfeksi 2 cotton bud steril 3 media transpor 4 Kertas label 5 Pipet tetes
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Musnahkan peralatan yang telah digunakan	

SEKSI KESEHATAN HEWAN

Prosedur : SOP PENGAMBILAN SAMPEL DENGAN SWAB PADA OROFARINGEAL

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempersiapkan alat dan bahan.		bankai unggas, cotton bud, media transpor	5 menit	penggunaan APD	-
2	Menggunakan alat perlindungan diri.		sarung tangan, masker, apron	5 menit	pengambilan swab orofaringeal	-
3	Melakukan pengambilan sampel dengan swab pada daerah orofaringel dengan cara memegang bagian jengger dengan salah satu tangan, lalu gunakan jari-jari tangan lain untuk membuka paruh, memasukkan jari ke ujung paruh untuk membuka paruh, memasukkan swab ke dalam paruh unggas lalu dengan cepat dan kuat usapkan swab ke dalam mulut di sekitar saluran pembuka trakea dan disepanjang celah choanal yang terletak di langit-langit mulut, mengeluarkan swan secara perlahan-lahan.		sarung tangan, masker, apron, cotton bud	10 menit	penyimpanan swab pada media transpor	-
4	Memasukkan swab ke media transpor dengan cara membuka vial dan memasukkan ujung swab ke dalam media transport kira-kira kedalam ¾ dari dasar vial, memotong dan mematahkan tangkai swab dengan gunting sehingga swab tetap di dalam vial dan tutupnya dapat ditutup dengan kencang, mengusap gunting dengan alkohol 70% sebelum memotong tangkai swab.		media transpor	5 menit	pemberian label	-
5	Memberi label dengan informasi yang diperlukan, mencocokkan identitas pada tabung dengan lembar data tempat informasi tambahan mengenai sampel didapatkan, mencatat nomor tabung sampel pada lembar data bersama dengan ID, tanggal, spesies, jenis sampel, umur.		media transpor, lembar data sampel, kertas label	5 menit	pencatatan informasi sampel	-
8	Mencatat semua informasi kedalam buku register sampel.		registrasi dan pendokumentasian sampel		pengiriman atau pemeriksaan sampel	-
9	Mengirim atau memeriksa sampel.		surat pengantar sampel	1 hari	sampel siap diperiksa atau dikirim ke laboratorium	-