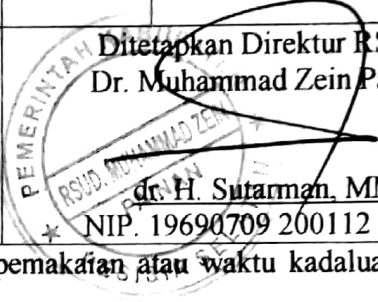




PENGAWASAN BARANG KADALUARSA

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Nomor Dokumen : PPI/ 041 /RSUD- PS/XI/2018	No. Revisi 01	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit : 6 November 2018	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  <u>dr. H. Sutarnan, MM</u> NIP. 19690709 200112 1 001	
Pengertian	Penetapan batas waktu pemakaian atau waktu kadaluarsa barang steril		
Tujuan	1. Barang yang sudah melalui proses steril dijamin sterilitas dengan melakukan monitoring mutu . 2. Memelihara efektifitas dan mutu barang / alat kesehatan steril 3. Mengurangi resiko infeksi 4. Meningkatkan masa pakai barang /alat kesehatan		
Kebijakan	Keputusan Direktur No. 800/PPI/002/RSUD-PS/X/2018 tentang kebijakan pelayanan Komite PPI		
Prosedur	1. Untuk wadah terbuka dari obat-obatan di area perawatan pasien, staf harus mengikuti tanggal kadaluarsa dari pabrik. 2. Jika obat tersebut dikeluarkan dari kemasan ganda/masal, maka tanggal kadaluarsa harus ditulis di label sebagai tambahan dari nama dan nomor lot. 3. Semua barang pada 3 bulan sebelum tanggal kadaluarsa akan dikirim kembali ke farmasi untuk diproses kepada supplier. 4. Semua obat-obatan dan produk medis yang kadaluarsa harus dikumpulkan, diberi label kadaluarsa yang jelas dan disimpan di tempat terpisah untuk pembuangan. 5. Semua hal lainnya yang berhubungan dengan obat-obatan dan konsumabel medik dapat mengacu pada kebijakan penyimpanan dan Perbekalan farmasi		

SIGN
HERE

6. Persediaan CSSD:

- Instrumen / peralatan medik yang akan di sterilkan dengan mesin Autoclave harus menggunakan etiket / tanggal kadaluarsa, yang fungsinya untuk mengetahui bahwa instrumen / peralatan medik tersebut dalam keadaan steril / tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.
- Adapun CSSD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menetapkan batas waktu masa kadaluarsa sebagai berikut
 - Peralatan yang disterilkan dengan Ethylen Oxide (Gas) dan dengan steam (panas) dikemas dalam kertas (Pouches) batas kadaluarsa pemakaian 6 bulan bila dibungkus double dan 3 bulan jika satu pembungkus sejak tanggal disterilkan
 - Peralatan yang disterilkan dengan steam (panas) dan dikemas dengan kain dua lapis, batas kadaluarsa pemakaian 3 hari sejak tanggal alat disterilkan
 - Semua tersebut diatas berlaku apabila kemasan diperlakukan dengan baik dan kemasan tidak rusak.
- Persediaan CSSD Supply yang sudah dekat atau berada pada tanggal kadaluarsa harus dikembalikan ke CSSD untuk diproses kembali.
- Untuk mengatur penggunaan dan distribusi alat yang sudah di steril menggunakan system FIFO yaitu First In, First Out (Pertama Masuk, Pertama Keluar), yakni cara mengatur terhadap waktu dan prioritas, sehingga barang yang lebih dulu di sterilkan dan masuk ke bagian rumah tangga dapat digunakan oleh ruang rawat terlebih dahulu

7. Barang dilarang digunakan atau tidak dapat digunakan apabila

- Kemasan sudah terbuka
- Sudah lewat dari tanggal kadaluarsa

Unit Terkait	1. CSSD 2. Ruang Rawat Inap 3. Poliklinik 4. Farmasi
---------------------	--