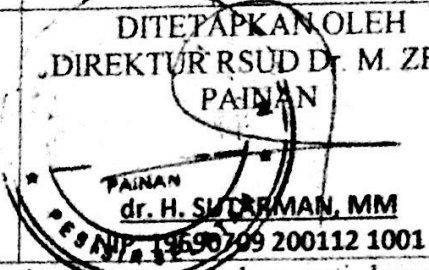


	PROSEDUR PRIMING (SIRKULASI TERTUTUP)		
	No Dokumen PP/004/RSUD-PS/III/2018	No. Revisi 1	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 10 Mei 2018	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN  dr. H. SUDIRMAN, MM NIP. 19690709 200112 1001	
PENGERTIAN	Pengisian Cairan Fisilogis dengan penambahan anti koagulan untuk dilakukan sirkulasi tertutup, sebelum hemodialisis dilaksanakan (lanjutan dari rinsing)		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mempermudah proses tindakan priming sehingga menjamin keselamatan pasien dan operator		
KEBIJAKAN	SK Kebijakan Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan Nomor : 800/PP/004/RSUD-PS/III/2018 Tanggal 20 Maret 2018 Tentang Kebijakan Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Unit Hemodialisa di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan		
PROSEDUR	1. Siapkan alat dan bahan a. Spuit 1 cc b. Heparin 2. Proses ini merupakan lanjutan dari proses rinsing (sirkulasi terbuka) 3. Jalankan pompa darah dengan kecepatan 200 cc/menit 4. Perhatikan bubble trap merah dan biru (isi NaCl 0,9 % pada bubble trap ¾ bagian) 5. Masukkan heparin 5000 unit (sesuai kebutuhan) kedalam sirkulasi melalui latek blood line merah 6. Untuk proses priming ini diperlukan NaCl 0,9% sebanyak 200 cc 7. Setelah proses priming selesai, dilanjutkan dengan proses penyambungan untuk melaksanakan hemodialisis		
UNIT TERKAIT	1.Instalasi Hemodialisa		