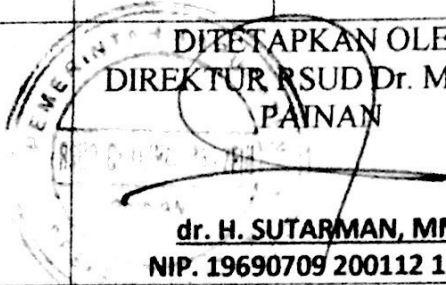


	PROSEDUR PENANGGULANGAN CLOTTING DIALIZER		
	No Dokumen PP/004/RSUD-PS/III/2018	No. Revisi 1	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 10 Mei 2018	 DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN <u>dr. H. SUTARMAN, MM</u> NIP. 19690709 200112 1001	
PENGERTIAN	Clotting dializer adalah darah yang membeku dan berada pada dializer bagian kompartemen darah		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk petugas dalam melakukan penanggulangan clotting dializer guna menjamin keselamatan pasien dan operator		
KEBIJAKAN	SK Kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Nomor : 800/PP/004/RSUD-PS/III/2018 Tanggal 20 Maret 2018 Tentang Kebijakan Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Unit Hemodialisa di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan		
PROSEDUR	1. Siapkan alat dan bahan a. Dializer 1 buah b. NaCl 0,9% 1000 cc c. Sarung tangan d. Heparin 5000 IU 2. Perawat mencuci tangan 3. Pakai sarung tangan 4. Identifikasi pasien 5. Buka klem infuse NaCl 0,9% 6. Klem blood line merah 7. Masukkan darah kedalam tubuh pasien dengan kecepatan 100 cc/menit dengan didorong NaCl 0,9% 8. Stop pompa darah 9. Tutup klem fistula outlet dan klem blood line biru 10. Buka klem blood line merah, dorong darah dengan NaCl 0,9% sampai bersih 11. Tutup klem fistula inlet dan klem blood line merah 12. Sambungkan ujung blood klem merah dan biru 13. Perhatikan program hemodialisa yang belum terlaksana 14. Tekan by pass		

	15. Tutup semua klem yang ada kemudian lepaskan dyalizer dari arteri dan vena line 16. Ganti dengan dyalizer baru (tuliskan nama, tanggal, nomor medrec) 17. Lakukan rinsing 18. Mulai lagi hemodialisa 19. Lanjutkan program hemodialisa yang belum terlaksana 20. Alat-alat dirapikan 21. Lepaskan sarung tangan 22. Perawat mencuci tangan 23. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan
UNIT TERKAIT	Instalasi Hemodialisa